

平成 25 年 12 月

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
 平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、下記検査項目の内容を変更する事になりましたので、取り急ぎご案内申し上げます。
 誠に勝手ではございますが、事情ご賢察の上、何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

敬白

***** 記 *****

■内容変更項目


項目No.	検査項目名	変更箇所	新	旧
32312	テストステロン	項目No.	32312	32311
		検査方法	CLIA 【アボットジャパン】	CLIA 【アボットジャパン】
		検体量	血清 0.5mL	血清 0.4mL
		基準範囲	男性 :1.92~8.84ng/mL 女性(有経) :0.15~0.44ng/mL (閉経) :0.12~0.31ng/mL	男性 :2.25~10.4ng/mL 女性(卵胞期) :0.33~1.26ng/mL (排卵期) :0.36~1.19ng/mL (黄体期) :0.41~1.12ng/mL
23151	抗セントロメア抗体	項目No.	23151	23150
		検査方法	CLEIA	EIA
		基準範囲	10.0未満 U/mL	陰性 :10.0未満 判定保留 :10.0~16.0未満 陽性 :16.0以上 なし
		単位	U/mL	なし
		所要日数	4~5日	5~8日
21211	抗BP180抗体	項目No.	21211	21210
		検査方法	CLEIA	EIA
		基準範囲	9.0未満 U/mL	9未満
		単位	U/mL	なし
		所要日数	4~5日	5~8日
3060	タリウム(尿)	検体量	随時尿 8.0mL	随時尿 10.0mL
		保存方法	冷蔵	凍結
		基準範囲	設定せず $\mu\text{g/L}$	随時尿 :0~1 $\mu\text{g/L}$
		所要日数	9~25日	16~23日

■変更期日


平成 25 年 12 月 28 日 (土) 受付分より

■テストステロン新旧二法の相関

[全体]

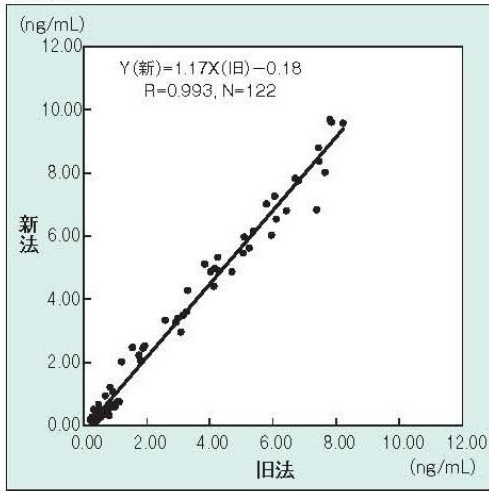


[低値域]

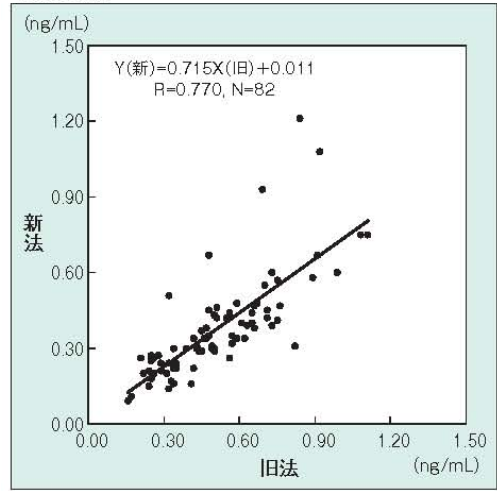

■抗セントロメア抗体新旧二法の相関

【抗セントロメア抗体】

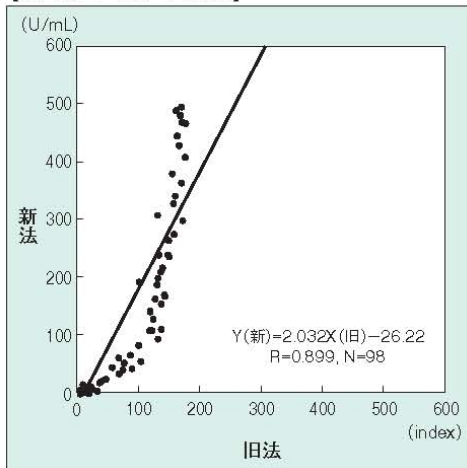

判定一致率

		旧法			計
		陽性	判定保留	陰性	
新法	陽性	49	0	1	50
	陰性	5	4	39	48
計		54	4	40	98

陽性一致率：90.7%


陰性一致率：97.7%

判定一致率：93.9%

(判定保留を陰性とした場合の一致率)

■抗BP180抗体新旧二法の相関

【抗BP180抗体】

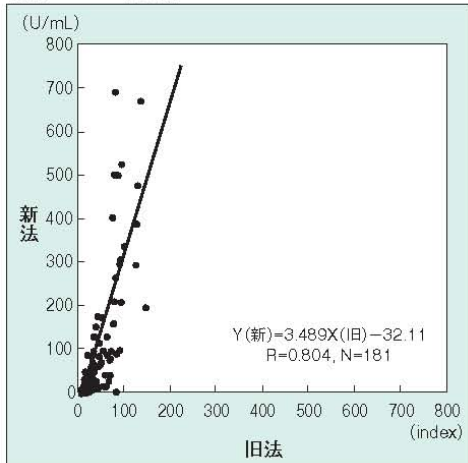

判定一致率

		旧法		計
		陽性	陰性	
新法	陽性	88	4	92
	陰性	18	71	89
計		106	75	181

陽性一致率：83.0%

陰性一致率：94.7%

判定一致率：87.8%